Voorwaarden Bioderm externe katheter


- ***Nauwe/strakke voorhuid?***
  Toelichting**:** De Bioderm is niet geschikt. De Bioderm externe katheter wordt op de glans(eikel) van de penis(niet op de voorhuid) bevestigd. De voorhuid dient vervolgens weer gedeeltelijk terug over de Bioderm externe katheter geschoven te worden.



- **Wondjes op de glans(eikel) van de penis?**
  Toelichting: De katheter kan hierdoor mogelijk vroegtijdig loslaten i.v.m. verzadiging hydrocolloïd door extra vochtproductie -> **niet geschikt.**

- **Gescheurde of vergrote uitgang van de plasbuis(Meatus)?**
  Toelichting: De Bioderm is niet geschikt. De meatus dient niet groter dan ca. 1cm te zijn i.v.m. het mogelijk ontstaan van een lekkage langs het afvoerend raakoppervlak.

- **Hypospadie?**
  Toelichting: De Bioderm is niet geschikt. De uitgang van de plasbuis(meatus) dient in het midden van de glans(eikel) gepositioneerd te zijn.

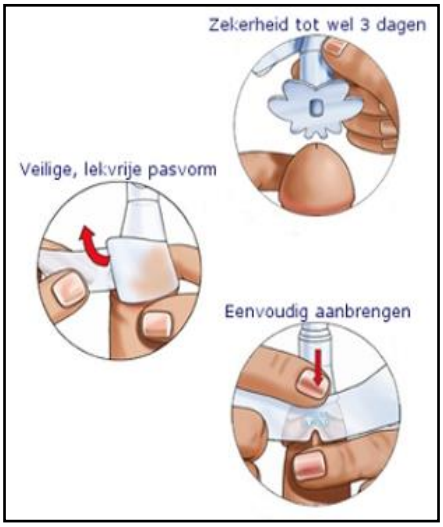

Artikelgegevens:

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Aantal in verpakking
21026	15285898	BioDerm® externe katheter	1 stuk